

ReadMe zur Installation mehrerer Upgrades

Betrifft alle Upgrade-Installationen von


- V2.00 (rev76)
- V2.10 (rev11)
- V2.20 (rev89)
- V2.30 (rev99)
- V2.40 (rev22) und nachfolgende Revisionsstände

1. Vorbemerkungen

Zur Aktualisierung Ihrer installierten MEDorganizer® Version, haben Sie von uns mehrere CDs bzw. Installations-Dateien erhalten. Die nachfolgenden Anweisungen sind strikt zu beachten.


Grundsätzlich erhalten Sie von uns immer den letzten Revisionsstand einer Programmversion. Sie müssen – ausgehend von Ihrer derzeit installierten Software-Version – immer schrittweise die nächst höhere Programmversion installieren.

Welche Softwareversion Sie installiert haben, erkennen Sie bei Programmstart im Startbild rechts unten. Bei bereits gestartetem Programm gehen Sie auf **HILFE** und **ÜBER**:

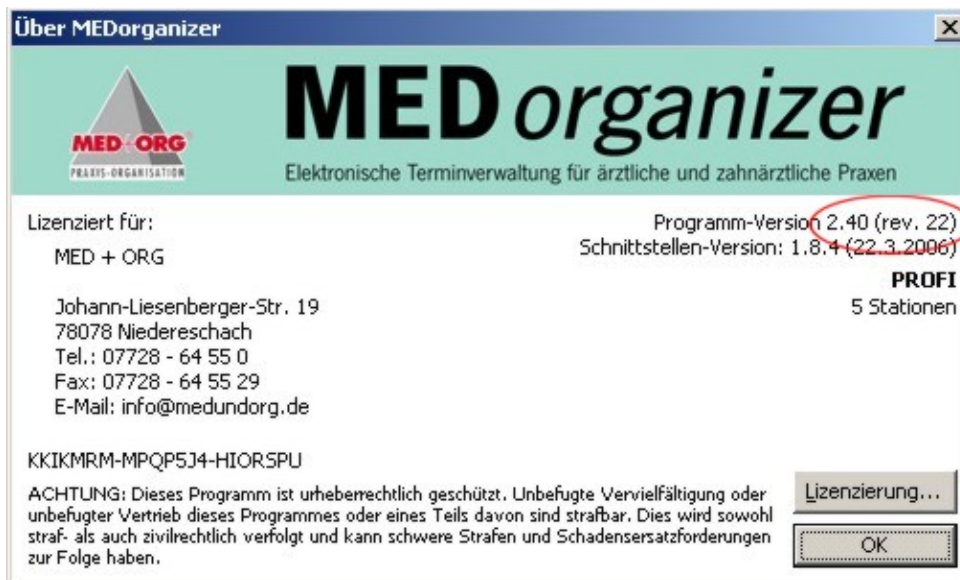

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben die schrittweise Installation mehrerer Upgrades auf die derzeit aktuelle Version. Bitte beginnen Sie bei dem Kapitel entsprechend Ihrer installierten Programmversion bzw. des zu installieren Upgrades.




2. Vorbereitungen

2.1. Beenden Sie *MEDorganizer*[®] an allen PC-Arbeitsplätzen. Achten Sie darauf, dass das Programm tatsächlich beendet wurde und nicht nur minimiert in der Task-Leiste des Betriebssystems steht. Achten Sie unter Windows 2000 auch darauf, dass in der Task-Leiste neben der Uhr kein Symbol für *MEDorganizer*[®]  angezeigt wird.

2.2. Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie auf das Server-Laufwerk, in dem sich die *MEDorganizer*[®] Dateiablage befindet. Bei einer Standard-Installation lautet der Zielpfad

X:\Programme\MED+ORG\MEDorganizer\...

wobei X den Laufwerksbuchstaben für die Netzwerk-Verknüpfung bezeichnet.

2.3. Erstellen Sie in dem o.g. Verzeichnis zwei weitere Ordner  **BACKUP** und  **SETUPS**, sofern diese noch nicht vorhanden sind. Kopieren Sie alle Setup-EXE-Dateien von unserer CD in den Ordner  **SETUPS**. Somit können Sie bei den nachfolgenden Installationsvorgängen von jedem Arbeitsplatz über das Netzlaufwerk auf die Dateien zugreifen und müssen nicht immer die CD einlegen.


2.4. Führen Sie eine Datensicherung (Backup) der *MEDorganizer*[®] Datenbank durch. Achten Sie darauf, dass das Backup nicht auf der lokalen Festplatte abgespeichert wird, sondern auf dem unter 2.3. genannten Backup-Verzeichnis auf Ihrem Server. Die von *MEDorganizer*[®] erstellten Backup-Dateien werden unter fortlaufend durchnummerierten Dateibezeichnungen abgespeichert: **DBSIMO1.MDB / DBSIMO2.MDB / ...**

2.4.1. Wenn Sie innerhalb von *MEDorganizer*[®] unter **EXTRAS** und **OPTIONEN** eine automatische Datensicherung eingerichtet haben, starten Sie das Programm an einer Station und beenden es anschliessend wieder.


2.4.2. Wenn Sie keine automatische Datensicherung eingerichtet haben, starten Sie das Programm an einer Station, richten die automatische Datensicherung ein und beenden es anschliessend wieder.

2.5. Deaktivieren Sie für die Dauer der Upgrade-Installationen Ihr Antivirus-Programm und evtl. Installations-Überwachungsprogramme.


3. Upgrade-Installation von V2.00 auf V2.10

- 3.1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie in dem unter 2.2. genannten Verzeichnis in den Ordner  **SETUPS**. Starten Sie die Datei **Setup V2.10 (rev11).exe** durch Doppelklick.
- 3.2. Entpacken Sie die Datei in dem angegebenen Zielpfad und klicken Sie immer auf **Weiter**, bis die Installation startet.
- 3.3. Die Installation ist erst dann komplett beendet, wenn in der Task-Leiste des Betriebssystems der Schalter des InstallShield nicht mehr sichtbar ist. Dies kann je nach Hardware (Prozessor / Arbeitsspeicher) einige Sekunden dauern.
- 3.4. Je nach Betriebssystem kann es vorkommen, dass der InstallShield einen Neustart der Arbeitsstation fordert. Führen Sie diesen auf jeden Fall immer durch. Durch den Neustart wird das eigentliche Programm auf dem lokalen Arbeitsplatz auf die neue Version V2.10 komplettiert.
- 3.5. Starten Sie nun *MEDorganizer*[®] an diesem Arbeitsplatz und führen Sie das angebotene Datenbank-Update durch. Hierbei wird die Datenbank-Struktur auf die neue installierte Version V2.10 angepasst. Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden. Bei den Upgrade-Installationen an den weiteren Arbeitsplätzen ist dies nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr angeboten.
- 3.6. Wiederholen Sie nun die Punkte 3.1. bis 3.5. an den restlichen Arbeitsplätzen an denen *MEDorganizer*[®] noch in der Version V2.00 installiert ist.
- 3.7. Durch die Upgrade-Installation wird Ihre *MEDorganizer*[®] Lizenz auf den Status einer Demo-Version zurückgesetzt. Eine neuerliche Freischaltung erfolgt erst nach Abschluss aller Upgrade-Installationen mit der Version V2.40 (siehe Punkt 6.7.).

4. Upgrade-Installation von V2.10 auf V2.20

- 4.1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie in dem unter 2.2. genannten Verzeichnis in den Ordner  **SETUPS**. Starten Sie die Datei **Setup V2.20 (rev89).exe** durch Doppelklick.
- 4.2. Entpacken Sie die Datei in dem angegebenen Zielpfad und klicken Sie immer auf **Weiter**, bis die Installation startet.
- 4.3. Die Installation ist erst dann komplett beendet, wenn in der Task-Leiste des Betriebssystems der Schalter des InstallShield nicht mehr sichtbar ist. Dies kann je nach Hardware (Prozessor / Arbeitsspeicher) einige Sekunden dauern.
- 4.4. Je nach Betriebssystem kann es vorkommen, dass der InstallShield einen Neustart der Arbeitsstation fordert. Führen Sie diesen auf jeden Fall immer durch. Durch den Neustart wird das eigentliche Programm auf dem lokalen Arbeitsplatz auf die neue Version V2.20 komplettiert.
- 4.5. Starten Sie nun *MEDorganizer*[®] an diesem Arbeitsplatz und führen Sie das angebotene Datenbank-Update durch. Hierbei wird die Datenbank-Struktur auf die neue installierte Version V2.20 angepasst. Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden. Bei den Upgrade-Installationen an den weiteren Arbeitsplätzen ist dies nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr angeboten.
- 4.6. Wiederholen Sie nun die Punkte 4.1. bis 4.5. an den restlichen Arbeitsplätzen an denen *MEDorganizer*[®] noch in der Version V2.10 installiert ist.
- 4.7. Durch die Upgrade-Installation wird Ihre *MEDorganizer*[®] Lizenz auf den Status einer Demo-Version zurückgesetzt. Eine neuerliche Freischaltung erfolgt erst nach Abschluss aller Upgrade-Installationen mit der Version V2.40 (siehe Punkt 6.7.).

5. Upgrade-Installation von V2.20 auf V2.30


- 5.1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie in dem unter 2.2. genannten Verzeichnis in den Ordner  **SETUPS**. Starten Sie die Datei **Setup V2.30 (rev99).exe** durch Doppelklick.
- 5.2. Entpacken Sie die Datei in dem angegebenen Zielpfad und klicken Sie immer auf **Weiter**, bis die Installation startet.
- 5.3. Die Installation ist erst dann komplett beendet, wenn in der Task-Leiste des Betriebssystems der Schalter des InstallShield nicht mehr sichtbar ist. Dies kann je nach Hardware (Prozessor / Arbeitsspeicher) einige Sekunden dauern.
- 5.4. Je nach Betriebssystem kann es vorkommen, dass der InstallShield einen Neustart der Arbeitsstation fordert. Führen Sie diesen auf jeden Fall immer durch. Durch den Neustart wird das eigentliche Programm auf dem lokalen Arbeitsplatz auf die neue Version V2.30 komplettiert.
- 5.5. Starten Sie nun *MEDorganizer*[®] an diesem Arbeitsplatz und führen Sie das angebotene Datenbank-Update durch. Hierbei wird die Datenbank-Struktur auf die neue installierte Version V2.30 angepasst. Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden. Bei den Upgrade-Installationen an den weiteren Arbeitsplätzen ist dies nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr angeboten.
- 5.6. Wiederholen Sie nun die Punkte 5.1. bis 5.5. an den restlichen Arbeitsplätzen an denen *MEDorganizer*[®] noch in der Version V2.20 installiert ist.
- 5.7. Durch die Upgrade-Installation wird Ihre *MEDorganizer*[®] Lizenz auf den Status einer Demo-Version zurückgesetzt. Eine neuerliche Freischaltung erfolgt erst nach Abschluss aller Upgrade-Installationen mit der Version V2.40 (siehe Punkt 6.7.).

6. Upgrade-Installation von V2.30 auf V2.40

- 6.1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie in dem unter 2.2. genannten Verzeichnis in den Ordner  **SETUPS**. Starten Sie die Datei **Setup V2.40 (rev22).exe** durch Doppelklick.
- 6.2. Mit der neuen Version V2.40 wird eine neue Version des InstallShield eingesetzt. Mit dieser Version haben Sie die Möglichkeit die zu entpackenden Installationsdateien nur temporär auf der lokalen Festplatte abzuspeichern und nach abgeschlossener Upgrade-Installation wieder zu entfernen, bzw. dauerhaft abzuspeichern.
 - Vorteil der temporären Abspeicherung: Es wird neben den reinen Programmdateien kein zusätzlicher Festplattenspeicher benötigt.
 - Vorteil der dauerhaften Abspeicherung: Sie haben einen Überblick aller installierter Updates / Upgrades, da jede neue Version / Revision in einem neuen Unterverzeichnis abgespeichert wird.

Entpacken Sie die Datei in dem angegebenen Zielpfad und klicken Sie immer auf **Weiter**, bis die Installation startet.

- 6.3. Die Installation ist erst dann komplett beendet, wenn in der Task-Leiste des Betriebssystems der Schalter des InstallShield nicht mehr sichtbar ist. Dies kann je nach Hardware (Prozessor / Arbeitsspeicher) einige Sekunden dauern.
- 6.4. Der InstallShield wird Ihnen unabhängig des installierten Betriebssystems immer einen Neustart der Arbeitsstation anfordern. Führen Sie diesen auf jeden Fall immer sofort durch. Durch den Neustart wird das eigentliche Programm auf dem lokalen Arbeitsplatz auf die neue Version V2.40 komplettiert.
- 6.5. Starten Sie nun *MEDorganizer*[®] an diesem Arbeitsplatz und führen Sie das angebotene Datenbank-Update durch. Hierbei wird die Datenbank-Struktur auf die neue installierte Version V2.40 angepasst. Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden. Bei den Upgrade-Installationen an den weiteren Arbeitsplätzen ist dies nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr angeboten.
- 6.6. Wiederholen Sie nun die Punkte 5.1. bis 5.5. an den restlichen Arbeitsplätzen an denen *MEDorganizer*[®] noch in der Version V2.30 installiert ist.
- 6.7. Durch die Upgrade-Installation wird Ihre *MEDorganizer*[®] Lizenz auf den Status einer Demo-Version zurückgesetzt. Sie haben nun 30 Tage Zeit einen neuen Freischalcode anzufordern. Hierfür starten Sie *MEDorganizer*[®] an einem Arbeitsplatz und öffnen **Hilfe** – **ÜBER** – **LIZENZIERUNG**.

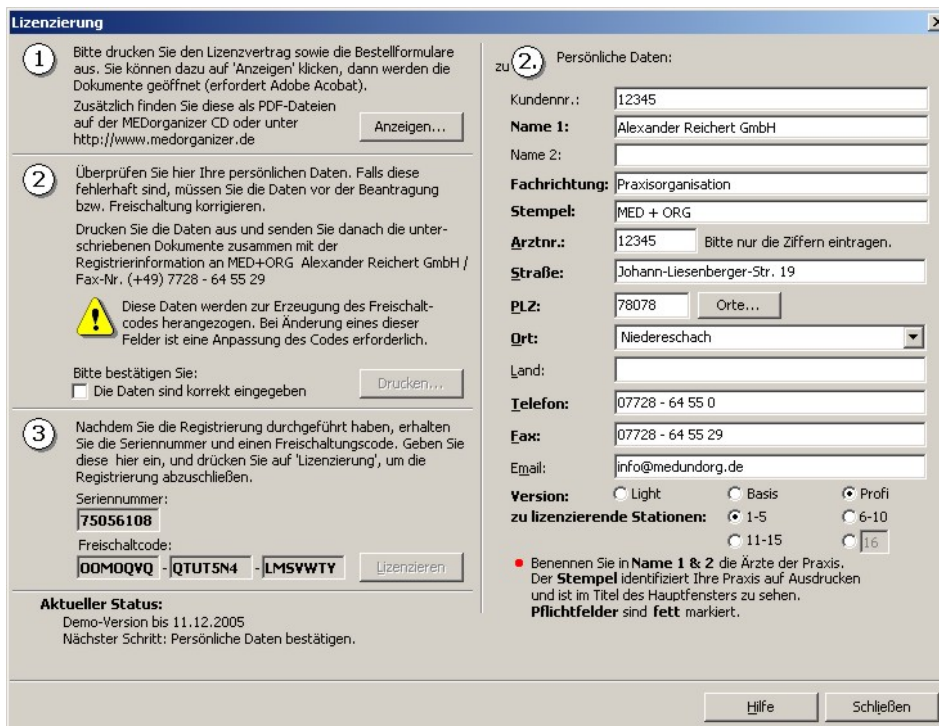

Lizenzierung

1 Bitte drucken Sie den Lizenzvertrag sowie die Bestellformulare aus. Sie können dazu auf 'Anzeigen' klicken, dann werden die Dokumente geöffnet (erfordert Adobe Acrobat).
Zusätzlich finden Sie diese als PDF-Dateien auf der MEDorganizer CD oder unter <http://www.medorganizer.de>

2 Überprüfen Sie hier Ihre persönlichen Daten. Falls diese fehlerhaft sind, müssen Sie die Daten vor der Beantragung bzw. Freischaltung korrigieren.
Drucken Sie die Daten aus und senden Sie danach die unterschriebenen Dokumente zusammen mit der Registrierinformation an MED+ORG Alexander Reichert GmbH / Fax-Nr. (+49) 7728 - 64 55 29

! Diese Daten werden zur Erzeugung des Freischaltcodes herangezogen. Bei Änderung eines dieser Felder ist eine Anpassung des Codes erforderlich.

Bitte bestätigen Sie:
 Die Daten sind korrekt eingegeben

3 Nachdem Sie die Registrierung durchgeführt haben, erhalten Sie die Seriennummer und einen Freischaltcode. Geben Sie diese hier ein, und drücken Sie auf 'Lizenzierung', um die Registrierung abzuschließen.

Seriennummer:
75056108

Freischaltcode:
00MQVQ - QTUT5N4 - LMSVWTY

Aktueller Status:
Demo-Version bis 11.12.2005
Nächster Schritt: Persönliche Daten bestätigen.

zu 2. Persönliche Daten:

Kundennr.: 12345

Name 1: Alexander Reichert GmbH

Name 2:

Fachrichtung: Praxisorganisation

Stempel: MED + ORG

Arztnr.: 12345 Bitte nur die Ziffern eintragen.

Straße: Johann-Liesenberger-Str. 19

PLZ: 78078 Orte...

Ort: Niedereschach

Land:

Telefon: 07728 - 64 55 0

Fax: 07728 - 64 55 29

Email: info@medundorg.de

Version: Light Basis Profi

zu lizenzierende Stationen: 1-5 6-10 11-15 16

• Benennen Sie in **Name 1 & 2** die Ärzte der Praxis. Der **Stempel** identifiziert Ihre Praxis auf Ausdrucken und ist im Titel des Hauptfensters zu sehen. **Pflichtfelder** sind **fett** markiert.

Hilfe Schließen

- 6.7.1.** Unter Punkt ① drucken Sie zuerst das Formular Freischaltung aus und vervollständigen die Angaben.
- 6.7.2.** Unter Punkt ② können Sie Änderungen an Ihrem Praxisstempel vornehmen. Achten Sie darauf, dass die gewünschte Software-Variante (Light / Basis / Profi) und die entsprechenden Arbeitsplätze korrekt angegeben sind.
- 6.7.3.** Wenn Sie alle Stammdaten erfasst haben, bestätigen Sie links unter Punkt ②, dass alle Daten korrekt eingegeben wurden. Dadurch wird der Schalter **Drucken** aktiv.
- 6.7.4.** Faxen Sie beide Dokumente an die MED+ORG Alexander Reichert GmbH unter 07728 – 64 55 20. Sie erhalten ebenfalls per Fax Seriennummer und Freischaltcode zurück. Dies erfolgt in der Regel noch am gleichen Tag. Zwischenzeitlich können Sie den Bereich Lizenzierung wieder verlassen und wie gewohnt mit MEDorganizer® weiterarbeiten.
- 6.7.5.** Um die von MED+ORG per Fax übermittelte Seriennummer und den Freischaltcode zu erfassen, wechseln Sie den Lizenzierungsbereich, wie unter Punkt 6.7. beschrieben. Die Felder für Seriennummer und Freischaltcode unter Punkt ③ sind bereits aktiviert. Nach Eingabe drücken Sie den Schalter **Lizenzierung**, Ihre Software ist nun freigeschaltet.